

# PISTOLA DE BIOPSIA MARQUEE

## 14GX 10 CM

### CÓDIGO: MQ1410


MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Pistola de biopsia core desechable de un solo uso con aguja de 14G x 10 cm, destinada para obtener muestras de tejidos blandos. Está codificado por color de acuerdo con los diversos tamaños de calibre: Verde

#### Características

- Cuenta con dos modos de disparo y dos opciones de profundidad de penetración, en base a la necesidad de manejo del rango desafíos posibles en biopsia de tejidos blandos.
- Presenta una punta mejorada, que facilita la inserción.
- Tecnología de Ultrasonido avanzada: Mejora la visibilidad tanto del dispositivo como de la cánula coaxial en ultrasonido.
- Espacio muerto corto: Minimiza la distancia entre la punta y el corte de muestra, esto podría facilitar el posicionamiento cercado a estructuras sensibles
- Dispositivo cuenta con modo dual y profundidad de penetración ajustable que ofrece opciones de 18 mm y 25 mm de control adicional.
- Modo de disparo automático que entrega el poder necesario para la biopsia core.
- Modo semiautomático permite disparo únicamente, de estilete entregando la confirmación visual de la ubicación del corte de la muestra
- Indicador de disparo: Puede disminuir el riesgo de disparo prematuro del instrumento.
- La longitud de la muesca de muestra para la profundidad de penetración de 18 mm, es de 17 mm y para la profundidad de penetración de 25 mm es de 19 mm.

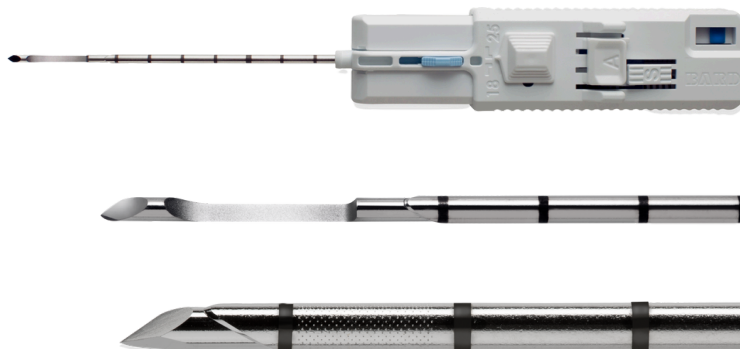

#### Biocompatibilidad

El producto se suministra estéril y apirógeno salvo que se haya abierto o esté dañado. Para uso de un único paciente. No reutilizar. No reesterilizar.

#### Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

#### Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

#### Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno. Libre de látex, apirógeno.

#### Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.